



СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

PATTERN APPROVAL CERTIFICATE
OF MEASURING INSTRUMENTS



НОМЕР СЕРТИФИКАТА:
CERTIFICATE NUMBER:

7407

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО:
VALID TILL:

4 октября 2016 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании положительных результатов государственных испытаний утвержден тип средств измерений

"Измерители кондуктометрические для микробиологических исследований "БакТрак",

изготовитель - **фирма "SY-LAB Geräte GmbH", Австрия (АТ),**

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под номером **РБ 03 09 0769 11** и допущен к применению в Республике Беларусь с 17 декабря 1998 г.

Описание типа средств измерений приведено в приложении и является неотъемлемой частью настоящего сертификата.

Заместитель Председателя комитета

С.А. Ивлев

4 октября 2011 г.



НТК по метрологии Госстандарта

№

09-2011

04 ОКТ 2011

секретарь НТК

Ивлева

АННУЛИРОВАН

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

УТВЕРЖДАЮ
Директор БелСИМ



Н.А. Жагора
2011

**Измерители кондуктометрические
для микробиологических исследований
"БакТрак"**

**Внесены в Государственный реестр
средств измерений**

**Регистрационный
№**

РБ 03 09 0769 11

Выпускают по документации фирмы "SY-LAB Geräte GmbH", Австрия.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Измерители кондуктометрические для микробиологических исследований "БакТрак" (далее – измерители "БакТрак") предназначены для ускоренной количественной и качественной оценки степени микробного загрязнения продуктов питания, парфюмерно-косметической продукции, основанной на регистрации изменения электрической проводимости питательной среды под воздействием роста микроорганизмов.

Применяются для контроля за стерильностью различных материалов и растворов, экспрессного определения санитарно-значимых микроорганизмов, скрининга патогенных микроорганизмов, исследования активности стартовых культур, изучения влияния различных факторов на рост микроорганизмов, определения ингибирующих веществ, мониторинга окружающей среды, сертификации пищевых продуктов и питьевой воды.

Область применения измерителей "БакТрак" – пищевая, косметическая и фармацевтическая промышленность, центры и лаборатории системы Госсанэпиднадзора, центры ветеринарного надзора, центры исследования и контроля качества воды, клинические и исследовательские лаборатории.

ОПИСАНИЕ

Измерители "БакТрак" имеют следующие модификации:

- измеритель "БакТрак 4100";
- измеритель "БакТрак 4300";
- измеритель "БиоТрак 4250".

Измеритель "БакТрак 4100" состоит из термостатирующего блока с 40 гнездами для измерительных ячеек и комплекта измерительных ячеек с электродами.

Измеритель "БиоТрак 4250" состоит из термостатирующего блока с 21 гнездом для измерительных ячеек и комплекта измерительных ячеек с электродами.

Измеритель "БакТрак 4300" состоит из термостатирующего блока с 64 гнездами для измерительных ячеек и комплекта измерительных ячеек с электродами.

Термостатирующий блок измерителя "БакТрак 4300" состоит из двух инкубаторных блоков (А и В), в которых можно установить две независимые температуры. Также имеется дисплей, на который выводится информация о температуре в инкубаторном блоке (А или В) и позиция анализируемой измерительной ячейки.



Измерители "БакТрак" имеют встроенный процессор, который обменивается данными с управляющим компьютером, что позволяет получать следующую информацию:

- измерение удельной электрической проводимости питательной среды в относительных единицах (М-параметр) и двойного электрического слоя вблизи электродов (Е-параметр);
- графическое изображение роста микроорганизмов в исследуемой пробе;
- калибровочные кривые для различных видов продуктов и микроорганизмов;
- количественную оценку общей микробной обсемененности проб (число микроорганизмов в 1 мл пробы);
- изображение степени зараженности образца по принципу светофорной системы (зеленый, желтый, красный);
- параметры каждой измерительной ячейки (номер пробы) и индикацию мест их установки.

Программное обеспечение измерителей "БакТрак 4300" позволяет одновременно проводить измерения и анализировать полученные ранее результаты; обрабатывать данные при помощи большого количества моделей и методик; задавать параметры и калибровочные зависимости для каждого образца; позволяет подключать до 12 модулей одновременно.

Внешний вид измерителей "БакТрак" и схема с указанием места нанесения знака поверки в виде клейма-наклейки приведены в приложении А к описанию типа.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Наименование характеристики	Значение характеристики		
	"БакТрак 4100"	"БакТрак 4300"	"БиоТрак 4250"
1	2	3	4
Номинальная функция преобразования	-	-	$x_i = \frac{57,3}{R_i}$, где x_i - удельная электрическая проводимость, См/м; R_i - показание измерителя
Диапазон измерения удельной электрической проводимости, См/м	от 0,1 до 2,0		
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения, %	±10,0		
Диапазон поддержания температуры в термостатирующем блоке, °С	от 0 до 65	от 0 до 65	от 0 до 56
Отклонение температуры в термостатирующем блоке, °С, не более	±1,0 в диапазоне от 0 °С до 15 °С; ±0,5 в диапазоне от 15 °С (вкл.) до 45 °С; ±1,0 в диапазоне от 45 °С (вкл.) до 65 °С	±1,0 в диапазоне от 0 °С до 15 °С; ±0,5 в диапазоне от 15 °С (вкл.) до 45 °С; ±1,0 в диапазоне от 45 °С (вкл.) до 65 °С	±1,0 в диапазоне от 0 °С до 15 °С; ±0,5 в диапазоне от 15 °С (вкл.) до 40 °С; ±1,0 в диапазоне от 40 °С (вкл.) до 56 °С
Дискретность задания температуры, °С	0,1		



Продолжение таблицы 1

1	2	3	4
Время выхода на режим, ч, не более	1,0		
Диапазон температур окружающего воздуха при эксплуатации, °С	от 15 до 35		
Напряжение питания, В	230±23		
Потребляемая мощность, В·А, не более	805	900	500
Габаритные размеры, мм, не более	300×580×230	430×640×380	400×440×535
Масса, кг, не более	21	34	20

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульный лист Руководства по эксплуатации измерителей типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки измерителей "БакТрак 4100" входят:

- измеритель кондуктометрический для микробиологических исследований "БакТрак";
- стабилизатор напряжения в количестве 2 шт. с напряжением питания (230±23) В, с частотой 50 Гц и мощностью 2250 Вт ;
- измерительные ячейки в количестве 80 шт. на один термостатирующий блок;
- дополнительные измерительные ячейки в количестве 40 шт.;
- штативы в количестве 2 шт. на один термостатирующий блок;
- программное обеспечение BACTRAC.EXE;
- калибровочные измерительные ячейки с сопротивлением 34 Ом, 47 Ом, 100 Ом, 470 Ом;
- руководство по эксплуатации;
- методика поверки МП.МН 623-99.

В комплект поставки измерителей "БакТрак 4300" входят:

- измеритель кондуктометрический для микробиологических исследований "БакТрак";
- штативы в количестве 4 шт. для подготовки и переноски образцов;
- штатив для пробирок 7 мл;
- 120 измерительных ячеек объемом 10 мл;
- температурные ячейки NTS 1000 Ом, 10 мл;
- набор измерительных ячеек для поверки прибора;
- набор для охлаждения;
- набор для очистки автоклавируемый;
- стабилизатор напряжения;
- бесперебойный источник питания 1400 VA Smart-UPS;
- кабель для UPS;
- крышки для измерительных ячеек непрямого метода;
- управляющий модуль на базе ПК, с расходными материалами, монитором и принтером;
- программное обеспечение в виде WINDOWS;
- руководство по эксплуатации;
- методика поверки МП.МН 623-99.

В комплект поставки измерителей "БиоТрак 4250" входят:

- измеритель кондуктометрический для микробиологических исследований "БакТрак" (без штатива).



- штатив для измерительных ячеек на 21 ячейку вместимостью 20 мл;
- комплект для подключения воды;
- ячейка для измерения температуры;
- комплект для очистки прибора;
- шнур питания;
- измерительные ячейки для прямых измерений;
- измерительные ячейки для непрямых измерений;
- руководство по эксплуатации;
- методика поверки МП.МН 623-99.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация фирмы "SY-LAB Geräte GmbH", Австрия.

Методика поверки МП.МН 623-99. "Измерители кондуктометрические для микробиологических исследований "БакТрак".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Измерители кондуктометрические для микробиологических исследований "БакТрак" соответствуют требованиям документации фирмы "SY-LAB Geräte GmbH", Австрия.


Межповерочный интервал – не более 12 месяцев для измерителей, применяемых в сфере законодательной метрологии.

Научно-исследовательский испытательный центр БелГИМ
г. Минск, Старовиленский тракт, 93, тел. 334-98-13
Аттестат аккредитации № BY/112 02.1.0.0025

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма "SY-LAB Geräte GmbH", Австрия.
Tullnerbachstraße, 61-65
A 3011 Neupurkersdorf, Austria
Phone +43 2231 62252-0
Fax +43 2231 62193

Начальник научно-исследовательского центра
испытаний средств измерений и техники БелГИМ

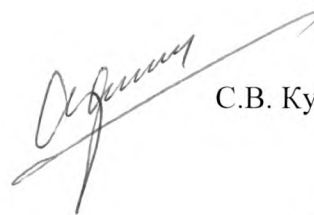

С.В. Курганский



ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное)

Внешний вид измерителей кондуктометрических для микробиологических исследований
"БакТрак" и место нанесения знака поверки в виде клейма-наклейки

Место нанесения знака поверки (клейма-наклейки)



Рисунок А.1 Внешний вид измерителя "БакТрак 4300"

Место нанесения знака поверки (клейма-наклейки)



Рисунок А.2 Внешний вид измерителя "БиоТрак 4250"



Место нанесения знака поверки (клейма-наклейки)

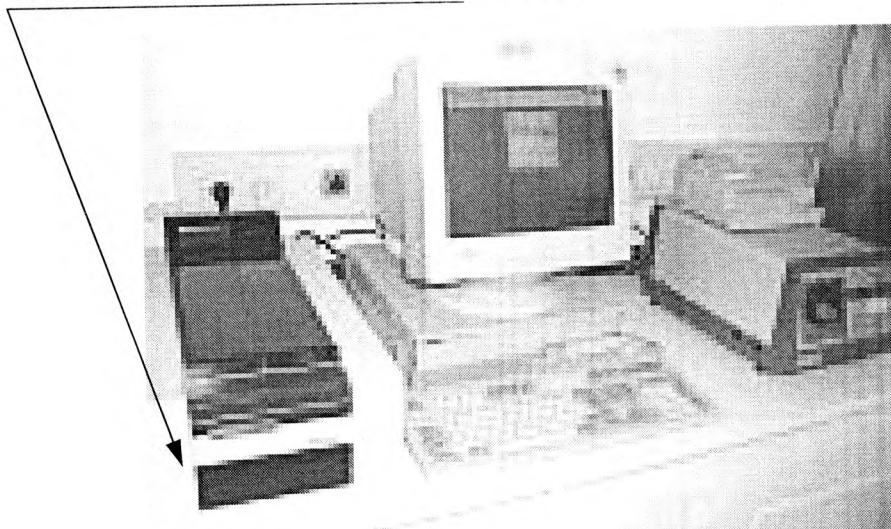


Рисунок А.3 Внешний вид измерителя "БакТрак 4100"